

「おおいた産
に使っていた
まかせんか？」
の機器を

機器導入に要する
レンタル料・リース料・
購入にかかる経費の一部を
支援します！

補助率

1/2以内
1施設あたり上限
50万円以内

おおいた産 医療関連機器等 製品ガイド

おおいた産医療関連機器導入推進事業対象製品



おおいた産医療関連機器導入推進事業

補助率：1／2以内 1施設あたり上限50万円以内

機器導入に要するレンタル料・リース料・購入にかかる経費の一部を支援します。

お申込み方法や事業の詳細は、別紙および大分県医療ロボット・機器産業協議会ホームページをご参照ください。

<https://medical-valley.jp/news/20210323/3458/>

【お申込み・お問合せ先】

大分県医療ロボット・機器産業協議会事務局

大分県商工観光労働部新産業振興室内 tel：097-506-3276



補助対象製品

登録機器は東九州メディカルバレー構想に基づき、医療関連機器の普及拡大を目的に、県内中小企業が製造・開発したものです。

1	株式会社 AK システム	車いす用着脱式足こぎユニット「こいじゃる！」 車いす用後付け式転倒防止補助具「ピタッとストッパー」
2	株式会社エイビス	エイビスみまもりシステム
3	日本ヒューマンメディック株式会社	オールワン ラバージ
4	株式会社デンケン	HAL® 医療用単関節タイプ 電気刺激 DRIVE 電気刺激 DRIVE-HOME MIEZO エアロゾルボックス 内視鏡専用エンドシールド
5	トクソー技研株式会社	VINCIT (ヴィンキット) アラーム通報器「アラームアイ・SY」 カフ圧調整器 口腔洗浄器「スピット Q1」 足踏式吸引器「アモレFS1」 通知センサー「ツウカナル 5M」 離床センサー「おきナール TW2」 離床センサー「サイドナールW」 離床センサー「ふむナール L3」
6	有限会社ビューティフルライフ	フォーケア 多機能いす：頭・手・足洗浄器 フォーケア ウォッシュサポート フォーケア NRpro SEATUS (シータス) SEATUSpro (シータスプロ) フォーケア 自在チェア フォーケア クッション pro
7	株式会社ブライテック	歩行器の電動化装置「B-GO」
8	ヘルメット潜水株式会社	褥瘡予防マットレス ポータブル簡易浴槽 らくらく車椅子背付きクッションセット
9	株式会社 LIFE	タッチエリア
10	株式会社ネオマルス	Smarteyes MULTI (スマートアイズ マルチ) Smarteyes MULTI+ (スマートアイズ マルチプラス)

車いす用着脱式足こぎユニット「こいじゃる！」

「こいじゃる！」は、施設でお持ちの車椅子に装着して利用する着脱式の足こぎペダルユニットです。自立支援や早期の在宅復帰・退院に向けて、車椅子に乗車した状態で、“楽しく”リハビリや運動ができる器具です。導入施設では、運動量や離床機会の増加、意欲・活動性の向上、生活不活発病予防、下肢筋力や可動域の維持向上など、ご利用者の状態に応じて多様な目的でご利用頂いています。




※病院／施設向け製品
(施設屋内専用)

こいじゃる！装着時




車いす用後付け式転倒防止補助具「ピタッとストッパー」

「ピタッとストッパー」は、車椅子の駐車ブレーキかけ忘れによる転倒・転落事故を抑制するための車椅子用補助器具です。施設内でお持ちの車椅子に装着してご利用頂きます。車椅子の後方移動を制動するだけでなく、例えば、片輪（片側）のみ駐車ブレーキをかけ忘れの際の車椅子前方横回転や横揺れも制動します。

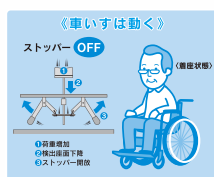

※病院／施設向け製品
(施設屋内専用)

※車椅子の駐車ブレーキの代替用としては使えません

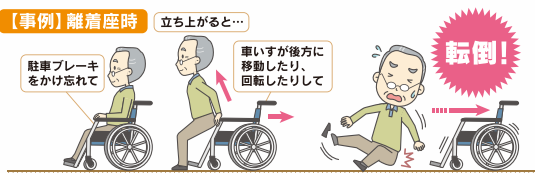

インフォメーション

住 所 〒879-5413 大分県由布市庄内町大竜 1474 番地

担当者 企画開発室 徳永 英治

ホームページ <https://www.aksys.co.jp/>

TEL 097-582-3311

FAX 097-582-3633

E-mail medical@aksys.co.jp

エイビスみまもりシステム

「エイビスみまもりシステム」はネットワークや既設のナースコールにも対応した、総合的な『見守り介護ロボット』です。状態の確認は、非接触タイプのパネルセンサーとバイタルセンサーで行います。ご利用者や患者がベッドから降りる前に通知することで、転倒・転落事故を防ぎます。また、睡眠中の呼吸と心拍をモニタリングすることで、訪室せずに安否を見守ります。




バイタルセンサーの設置状況



パネルセンサーの設置状況



●エイビスみまもりシステム 使用イメージ

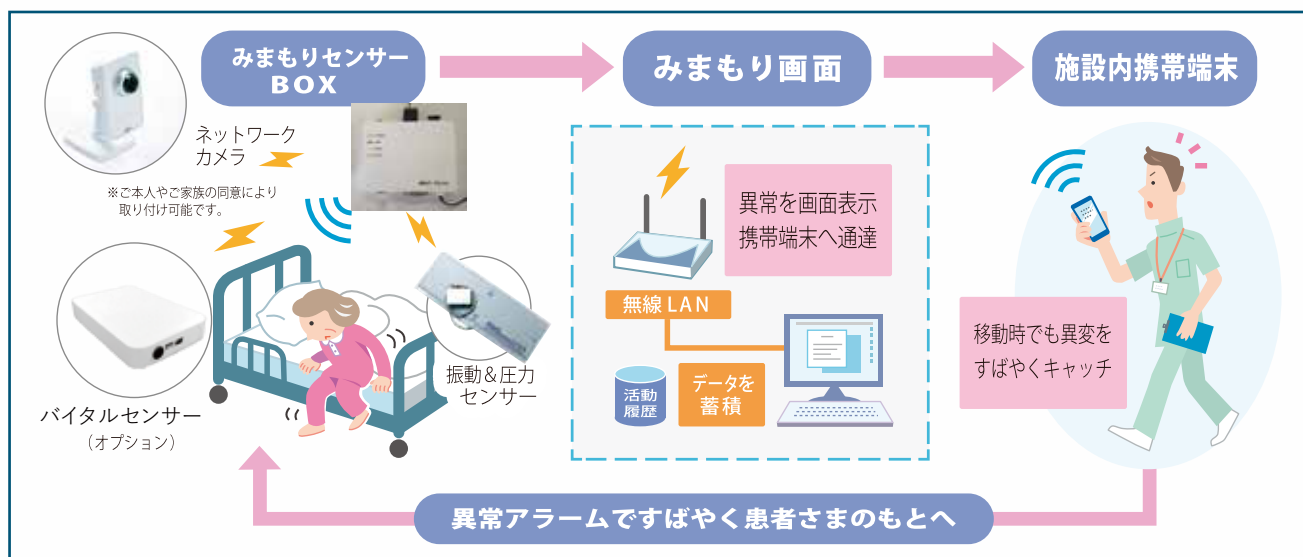

インフォメーション

住 所 〒870-0026 大分県大分市金池町 3-3-11 金池 MG ビル

担当者 介護事業本部 久保 雅紀

ホームページ <https://aivs.co.jp/>

TEL 097-536-0999

FAX 097-536-0998

E-mail m_kubo@aivs.co.jp


ALLONE LAVAGE オールワン ラバージ

整形外科用洗浄器とは？

整形外科手術時に術部の洗浄をするために使用します。また、用途にあわせてチップや噴射形態が選択できます。

●オールワン ラバージの特徴

- 人間工学に基づいた握りやすいハンドガンタイプ
- ワンタッチで高速 / 低速の流量調節可能
- 動線確保に優れたバッテリー内蔵式
- LED ライト付きで術野深部の視認補助

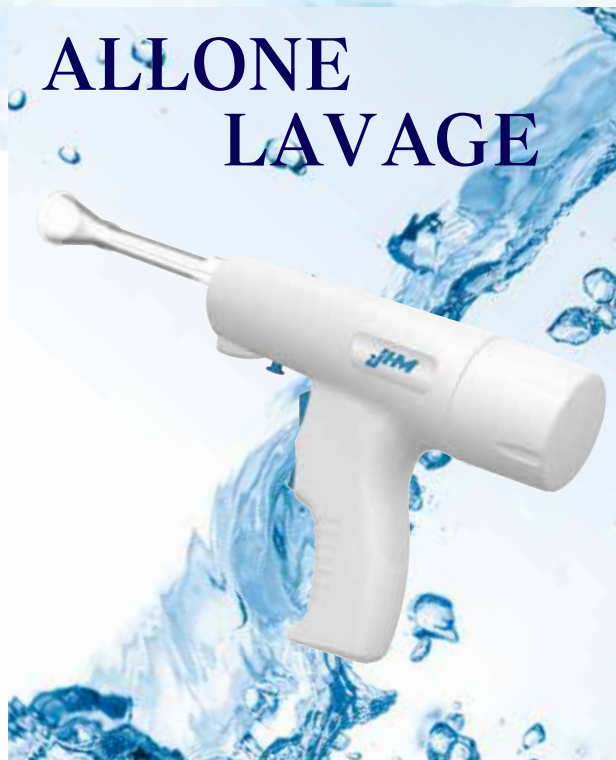

管理医療機器（クラスII）



OFF



ON

ON・OFF 可能な LED ライト



HIGH (強)




LOW (弱)

流量調節



バッテリー内蔵

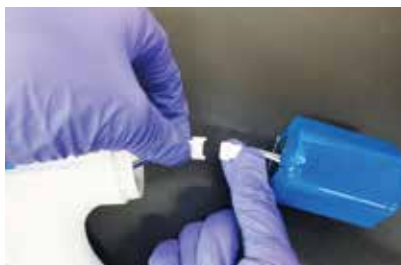

インフォメーション

住 所 〒870-0848 大分県大分市賀来北 2 丁目 16 番 34 号

担当者 マーケティング推進部 金（キム） **ホームページ** <http://www.hyuman.co.jp>

TEL 097-549-4140

E-mail marketing@hyuman.co.jp

HAL® 医療用単関節タイプ

身体を動かすとき、脳から筋肉へ神経を通してさまざまな信号が送られています。HAL®医療用単関節タイプは、装着者の「生体電位信号」を読み取り、それに応じて関節を補助し、装着者の意思に従った動作を実現します。

- ・各関節の集中的なリハビリをサポート

アタッチメントを交換することによって、肘、膝、足首などの様々な関節部位の集中的なリハビリを一台の機体で行うことができます。



HAL® の原理




肘関節アタッチメント



膝関節アタッチメント

※HAL®医療用単関節タイプは電気刺激 DRIVE とセットでレンタルが必要となります。

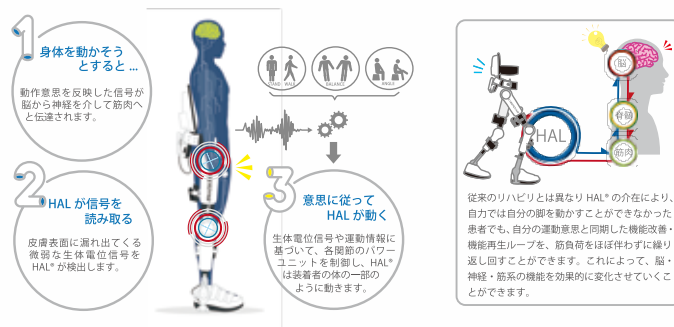

電気刺激DRIVE

脳卒中などが原因で起こる麻痺の回復および機能改善を目的としたリハビリテーション用電気刺激装置です。

- ・2ch 搭載のハンドスイッチで二つの筋群への意図したタイミングでの電気刺激が可能。
- ・日常生活動作練習など様々な訓練にも使用可能。

●電気刺激 DRIVE 用ゲルパッド

電気刺激DRIVE専用のゲルパッドです。

LS(長方形)、MS(正方形)の2種類のサイズ



交換用ゲルパッド M 交換用ゲルパッド L



電気刺激DRIVE-HOME

医家向け機器開発のノウハウをもって開発した家庭用低周波治療器です。

- ・目的に合わせた3つの治療モード(痛み、筋肉、むくみ)
- ・電池交換の必要ない本体充電式を採用



MIEZO

MIEZO は覗くだけで立体視、眼位の簡易検査とトレーニングが行える両眼視機能検査装置です。情報端末操作の長時間使用による目の筋肉（毛様体筋）の疲労をリラックスさせることができます。


- 立体視、眼位の簡易検査が可能
「立体視検査」は立体感や奥行き感をチェックする検査です。
「眼位検査」は左右の目が向いている方向が内寄りまたは外寄りなどの程度がチェックできる検査です。
- レンズ内に映る立体的な画像を見ることで凝った目の筋肉をストレッチできます。



エアロゾルボックス

飛沫感染リスクの低減を目的とした用具エアロゾルボックスです。


- 医療現場のウイルス対策や感染防止にお役立ていただけます。
- 両手の作業穴がある透明なPET素材で医療用ベッドにも設置できるサイズです。

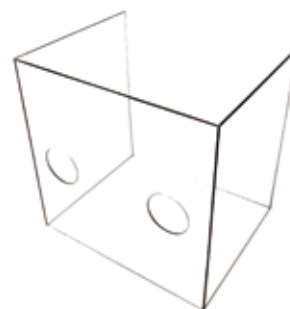

内視鏡専用エンドシールド

内視鏡専用の飛沫感染防止用具エンドシールドです。

- 新型コロナウイルス感染の可能性の高い内視鏡検査は縮小傾向にあり癌などの診断が遅れています。医療従事者への感染リスクを最小限に抑え、適切な検査を継続するために Endoshield（内視鏡専用エアロゾルボックス）を開発しました。

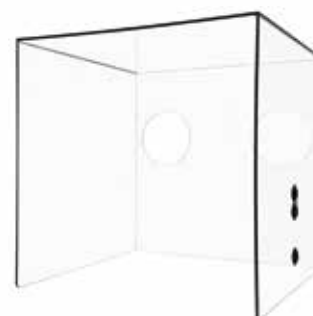

インフォメーション

住 所 〒873-0002 大分県杵築市南杵築中ノ原 2832 番地

担当者 奈須 誠司

ホームページ <https://www.dkn.co.jp/>

TEL 0978-64-1670(代表) **FAX** 0978-64-1671 **E-mail** seiichi.nasu@dkn.co.jp

VINCIT(ヴィンキット)

VINCIT(ヴィンキット)は「打ち勝つ」という意味で感染症に打ち勝つ思いを込めた商品です。

- ・病室を陰圧にする簡易陰圧装置
- ・密集場所の空気を洗浄・殺菌するパーテーション陰圧装置
- ・PCR検査等の検査時の検体採取や内視鏡検査時の飛沫感染を吸収し二次感染を防止するスポット装置。全国の病院や施設、密状態の場所での用途があります。



アラーム通報器「アラームアイ・SY」

人工呼吸器のトラブル時に「人工呼吸器のアラーム信号」を検知して、タイマー設定時間後にナースコールシステムやワイヤレスコールシステムに通報します。
タイマー設定で吸引等でのアラーム出力の誤通報を防止できます。



カフ圧調整器

- カフキーパーDX(左):気管チューブのカフ圧を自動で調整・保持します。
電動で素早く簡単に加圧、減圧操作が出来ます。
異常圧力はアラームでお知らせします。
- カフキーパー(中央):気管チューブのカフ圧を自動調整・保持します。
電源を使用しない為、配線や電池交換の必要がなく、取扱が容易です。
- カフチェッカー(右):気管チューブのカフ圧を調整します。
加圧、減圧の操作が簡単で急加圧、急減圧を防ぎます。



口腔洗浄器「スピットQ1」

口腔内から唾液を持続的に吸引しますので、唾液の流涎による不快感を解消します。
運転音が静かで優しく吸引しますので、高齢者から小児まで幅広くご使用頂けます。
大容量収集ボトルで多量の唾液も安心。安全ボトルで排泄の本体流入を防止します。



足踏式吸引器「アモレFS1」

電源を使用せず、簡単な足踏み操作で陰圧を発生させる吸引器です。台風や落雷等による停電時や外出時等に電源の無い場所での吸引の際に必要な商品です。緊急用や屋外用として常備しておくくと安心です。



通過センサー「ツウカナル5M」

玄関、エレベーター前、部屋の出口や通路に設置し、本人がセンサーの前方を通過するとセンサーが感知してナースコールセンターまたはコール機器にコールして知らせます。センサー本体と反射ポールの間が5mまで確実に検知できます。



離床センサー「おきナールTW2」

ベッドからの離床や転落事故などを検知通報してトラブルを防止し、介護での負担を軽減するマット式センサーです。

マットレスの下(又は上)に置くだけで簡単にセットでき、ベッドの上で起き上がるとナースコールセンターまたはコール機器にコールして知らせます。遅延タイマーで誤作動を防止、マットレスの下に置くので本人に気づかれずに検知できます。



離床センサー「サイドナールW」



ベッドからの離床や転落事故などを検知通報してトラブルを防止し、介護での負担を軽減するマット式センサーです。ベッドの端部のマットレスの上に置くだけで簡単にセットでき、ベッドから降りようと端に寄った際にナースコールセンターまたはコール機器にコールして知らせます。シーツの下に置いて検知するので本人に気づかれずに検知できます。

離床センサー「ふむナールL3」

ベッドからの離床や転落などを検知通報してトラブルを防止し、介護での負担を軽減するマット式センサーです。

ベッドの横に敷いて、本人がマットを踏むとセンサーが感知してナースコールセンターまたはコール機器にコールして知らせます。検知面積の広い幅広タイプ。



インフォメーション

住 所 〒879-0232 大分県宇佐市大根川 318 番地

担当者 営業部 マーケティングチーム 石田 忠 **ホームページ** <http://www.tokso.net/>

TEL 0978-33-5595 **FAX** 0978-33-5596 **E-mail** tadashi.ishida@tokusoken.com(問い合わせ窓口)
info@amor.co.jp(会社代表)

フォーケア 多機能いす

《特許取得 TAIS 登録》(福祉仕様: BL-MT-DS02)

《導入先》医療:形成外科、病棟設備、歯科、介護施設、理美容、個人

●来院～診療～お帰りまで…ワンストップ施術可

1. ワンアクション電動ティルト&リクライニングは、身体がズレ下がり難く負担を軽減
2. 昇降機能で、腰痛防止と業務負担を軽減
3. 移乗し易いアームサポートで負担を軽減ノーリフティングケア可
4. 脱着枕(大・小・簡易安頭台)で各施術に対応
5. 体圧分散シートで座姿勢負担を軽減



フォーケア ウォッシュサポート: 頭・手・足洗浄器

《特許取得 TAIS 登録》(室内向け: BL-WSH01/ 訪問向け: BL-WSB02)

《導入先》医療、介護施設、理美容、個人

●無段階の高さ調整により、洗髪や足洗浄、足浴等フットケアが可能

1. 軽量(11.6kg)で持ち運び易く、車載し易い
2. キャスター(大・小)付、伸縮でコンパクト収納可
3. フットケア・洗髪で自由な高さ調整(38cm)
4. 頭や足にフィット、自在な首振り機構(18°)
5. 頭・手・足置き台で安全に頸部や手足を設置可
6. 感染予防対策…専用ディスパ洗浄カバー有



フォーケア NRpro

《TAIS 登録》(BL-FN02)

《導入先》医療:病棟、歯科、介護施設、訪問理美容

●洗髪・口腔ケアなど向け車椅子

1. フットペダルリクライニング操作で、座面が連動昇降(90mm)
2. ノーリフティングケア可能なアームサポート
3. 身体がズレ下がり難いリクライニングで腰痛防止
4. 汚れや埃が溜まり難く衛生的な特注シートカバー
5. アルミボディで取り回し易く、自由に調節できる3Dヘッドサポート



SEATUS(シータス)

《特許取得 TAIS 登録》(室内専用)

《導入先》介護施設、福祉施設、個人

●自走式セルフティルト&リクライニング(連動)車椅子(室内用)

1. リラックスしたい時や仮眠時、同じ姿勢を続けた時に休息姿勢がとれます
2. 軽い力でリクライニング操作が可能
3. ズレ下がり難くお好みの角度に調整、残存機能に角度を限定可
4. 小回りに優れた自走式6輪走行
5. スイングアーム式リアキャスタで後方転倒を防止
6. テンション調整シートで心地よいシーティング可



SEATUSpro (シータスプロ)

《特許取得 TAIS 登録》(室外・室内使用)

《導入先》個人、介護施設

●自走式セルフティルト&リクライニング車椅子(室外・室内兼用)

1. リラックスしたい時や仮眠時、同じ姿勢を続けた時に休息姿勢がとれます
2. アクティブユーザー向け車椅子
3. 軽い力でリクライニング操作が可能
4. ブレ下がり難く自由な角度で休息姿勢になります
5. 小回りに優れた自走式6輪車、転倒防止輪付
6. セルフヘッドサポートで枕の上下、前後の位置を調整可(オプション)



フォーケア 自在チェア

(低床タイプ: BL-FJC2)

《導入先》医療:形成外科・オペ室、介護施設:入浴後介助、理美容

●昇降&座面ふり機構で最適なポジショニングが可能なチェア

1. フットケアやリハ用チェアとしてお勧め
2. 着座者の動きにあわせて座面が全方位に自在に傾斜します
3. 昇降・可動式の作業いすとして、施術用や入浴後の身体拭き介助で好評
4. ケア用として様々なシーンで兼用可能
5. 施術者の腰痛防止・業務の省力化に貢献



フォーケア クッションpro

《特許取得 TAIS 登録》(BL-FC35W) 体圧分散クッション

《導入先》医療、介護施設、理美容、個人

●「座る」をより快適に、心地よくする体圧分散クッション

1. 腰痛防止、褥瘡予防につながり、座部と背部に兼用可
2. 背面では背を伸ばす姿勢と円背の姿勢の選択可
3. 二枚の組合せで身体に合わせたセッティングが可能
4. 高齢者や腰痛の方、座姿勢が辛い方等、事務職、運転者、座るお客様に安楽なポジショニングを提供
5. 本体・カバー洗浄可 ※カバー片面はアルコール等で要清拭



インフォメーション

住 所 〒870-0030 大分県大分市三芳 939 番地の 15

担当者 管理部 加嶋 忍

ホームページ <http://www.be-life.info>

TEL 097-546-0666

FAX 097-546-6999

E-mail info@be-life.info

歩行器の電動化装置「B-GO」

歩行器の電動化装置「B-GO」は重度障がい児の自立を支援します。

重い障がいを持つ児童は、自ら動く、移動するといった事が難しいため、そのような経験が乏しくなりやすくなります。また、自らの意志で動くという経験は、リハビリそのものに対する興味・意欲の向上に役立ち、さらに子供たちの社会性や関心が育っていく過程が重要となります。

障がい児用電動化装置は自力で移動する手段を持たない重い障がい児の移動を手助けする歩行器に電動移動装置を付加し、自らの意志により自由に移動できることで、運動能力促進及び日常生活の質的向上を目的とするものです。



電源 / 緊急停止スイッチ

取付クランプ

介助者スイッチ

ジョイスティック

●仕様

項 目	仕 様
けん引重量	最大 60kg (条件によります)
走行速度	最大 2km/h
連続走行時間	約 4 時間 (条件によります)
充電時間	約 8 時間
ビックスイッチ入力	前・後・右・左

インフォメーション

住 所 〒870-0107 大分県大分市海原 739 番地 3

担当者 技術部 相原 茂

ホームページ <http://www.btec-net.co.jp>

TEL 097-574-7899


FAX 097-574-7830

E-mail btec1@btec-net.co.jp

褥瘡予防マットレス

独自に開発された極細編成樹脂を網状に絡み合わせた立体構造が優れた体圧分散機能を生み出し、頭・肩・腰・足に集中する負担が大幅に軽減。空気を包み込むような構造は、「優れた体圧分散」「抜群の通気性」「高い復元力」「水洗いできる」という画期的な特徴を持ちます。体の一部だけに負担がかからないため、褥瘡（床ずれ）予防にもお使い頂けます。また独自の高反発構造により、楽に寝返りができ、安定した姿勢で眠れます。

アレルギーの原因となるダニやハウスダスト等の原因もシャットアウト！軽くて丈夫な特殊素材のため、水にも強く、ゆっくりと水をかけるだけで丸洗いき、速乾性もあるので、いつでも清潔に保てます。9割以上が空気の層でできているため、汗や湿気を通して蒸れることがなく、年中快適にご使用頂けます。

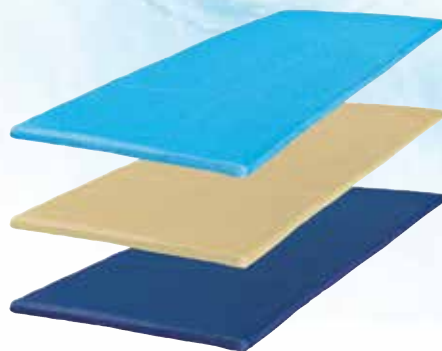

ポータブル簡易浴槽

クロッツ ポータブル簡易浴槽 仰臥位入浴タイプは、介護者が部屋で入浴できる画期的な製品です。1人でも組み立てることが出来、色々な場所での入浴が可能です。断熱性・弾力性が高いウェットスーツ素材は、ひんやりせず、負傷事故も起きにくい素材です。給湯機能はなく、キッチンの給湯器や洗面所、お風呂などのお湯の供給元からホースを引いて使用し、バケツまたはホースで排水口へと排水します。在宅介護だけでなく、入院、アウトドア、災害時の緊急用品としてなど、様々なシーンで役立つ便利アイテムです。



らくらく車椅子背付きクッションセット

リクライニング車椅子に対応した少し硬めタイプの背あて付クッションです。ややハードタイプなので衝撃吸収性が高め。通気性に優れ長時間座っても褥瘡になりにくく、また左右に付けられたサポートクッションで介護者を固定しやすい仕様になっています。ファスナーで背部分と座部分を分割でき、汚れた部分だけのカバーを外して洗えます。中材もシャワーで洗えて漂白も可能です。ベルト付きで後側と下側を車椅子に結んで固定できます。



インフォメーション

住 所 〒873-0202 大分県国東市安岐町瀬戸田 1300 番地

担当者 営業課長 平野 賢二

ホームページ

<https://www.cloz.co.jp/> (コーポレートサイト)
<https://www.cloz.biz/> (クロッツオンラインショップ)

TEL 0978-67-2251

FAX 0978-67-2377

E-mail

helmet@cloz.co.jp(代表) hirano@cloz.co.jp(担当)

タッチエリア

■ 本 体

●据え置き型センサー（UHF帯RFIDリーダー）

自立通信するため、施設内ネットワークに手を加える必要はありません。
また、設置はご希望の場所に置くだけで工事等も不要です。

型 式	LF-F29
寸 法	200mm×200mm×150mm
無線周波数	920MHz 帯
電 源	AC100V(50/60Hz)



●天井付きセンサー（UHF帯RFIDリーダー）

施設内の通信が使えない場合は、こちらで準備いたします。
設置には工事が必要で、事前に図面等のご準備をお願いいたします。

型 式	LF-C10
寸 法	300mm×300mm×150mm
無線周波数	920MHz 帯
電 源	AC100V(50/60Hz)



■ 消耗品

●ICシール

通信距離と感度を両立したバランスの良いシールです。
水や衝撃にも強く、対象物に貼り付けやすくなっています。

寸法 (H/W)	27.0mm×97.0mm
周波数範囲	860MHz～960MHz
材 質	紙または PET
使用温度	-40℃～85℃
重 量	0.6g



IC シールイメージ

●タッチエリアの活用方法



●タッチエリアの仕組み



インフォメーション

住 所 〒870-1117 大分県大分市高江西 1-4361-10

ホームページ <https://life-corp.co.jp> (会社 HP) <http://toucharea.life/> (製品 HP)

TEL 097-576-7607 FAX 097-576-7627

製品に関するお問い合わせは弊社 HP のお問合せページからお願いいたします。

「With コロナ時代」

スムーズに多人数を検知・検温できる高性能サーマルカメラ

ノンストップで多人数を同時検知 + 表面温度測定 + マスク着用確認

Smarteyes MULTI (スマートアイズ マルチ)

多人数検知サーマルカメラ

SMART EYES MULTI

多人数を検知・検温できる、タッチスクリーン内蔵の高性能サーマルカメラ。別途モニターは必要なく電源一つでどこでも設置できるので、用途に合わせた移動をスムーズに行えます。主な機能は最大 20 人の同時検知、表面温度の検温やマスク検知になります。カメラ本体に付いたタッチパネル式のモニタースクリーンで、スピーディーな確認と操作を実現します。

機能	検温距離	5m以内	動作環境	-10℃~60℃
	検出速度	最大150~200人/分	認識精度	2m以内±0.3℃、5m以内±0.5℃
	表面温度測定範囲	32℃~42.5℃ (外気の影響を受けるため誤差が生じる可能性があります)		
サイズ・重量	本体重量	4.3kg	カメラサイズ	255mm×170mm×210mm
	スタンド重量	1.5kg	スタンド高度	1~2m



- 多人数同時検知
- タッチスクリーン
- 表面温度測定
- マスク検知
- かんたん設置
- 工事不要

Smarteyes MULTI+ (スマートアイズ マルチプラス)

AI多人数自動検温カメラ

SMART EYES MULTI+

多人数を検知・検温できる高性能サーマルカメラ。温度基準装置内蔵で高い検温精度を実現。主な機能は最大 20 人の同時検知、表面温度の検温やマスク検知になります。TV モニター付きなど複数のプランをご用意しています。

機能	検温距離	3m以内	動作環境	室内/-5℃~35℃
	検出速度	最大150~200人/分	認識精度	1m以内±0.1℃、3m以内±0.3℃
	表面温度測定範囲	36℃~50℃ (36℃以下の場合、表面温度正常とみなし36.1℃と表示します)		
サイズ・重量	本体重量	1.5kg	カメラサイズ	230mm×142.6mm×88.5mm
	スタンド重量	1.5kg	スタンド高度	1~2m




- 多人数同時検知
- 表面温度測定
- マスク検知
- ガイド音声設定
- データ保持
- 工事不要

インフォメーション

住所 〒870-0034 大分県大分市都町 2-1-10 ウォーカービル 8F

担当者 IT ソリューション事業部 時/塩谷 ホームページ <https://www.neomars.co.jp>

TEL 080-3159-3859 FAX 097-573-3130 E-mail smarteyes@neomars.co.jp

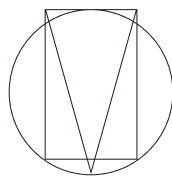

MVO
medi valley OITA

展示・交流スペース 「メディバレーおおいた」



© 有限会社ジェイクス

〒870-0820 大分市西大道2-3-8
株式会社アステム大分本社内事務棟4階
TEL:070-7429-4405

開館時間／10:00～16:00

(土日祝日、お盆期間、年末年始を除く)

ご来館の際は前日までにご連絡下さい。

大分県医療ロボット・機器産業協議会

〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号
大分県庁舎本館7階
大分県商工観光労働部新産業振興室内



<https://medical-valley.jp/>